



## **SENIOR CARE PRODUCT**

ผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ดูแล

## **ALLERGEN-PROOF PRODUCT**

ผลิตภัณฑ์กลุ่มโรคภูมิแพ้

# SENIOR CARE PRODUCT

ผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้สูงวัยและผู้ดูแล

## MITEX CARRYING SHEET

### ผ้ายกตัวไม่เท็กซ์

ผ้ายกตัวไม่เท็กซ์ใช้สำหรับช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตนเองได้ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้บาดเจ็บ ผู้พิการหรือทุพพลภาพผ้ายกตัวไม่เท็กซ์ช่วยลดการบาดเจ็บของผู้ป่วยอันเกิดจากการเสียดสีหรือกระแทกในระหว่างการเคลื่อนย้ายและยังช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อของผู้ดูแล เนื่องจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในท่าทางที่ไม่ถูกต้องได้อีกด้วย



### MITEX CARRYING SHEET XL


ผ้ายกตัวไม่เท็กซ์ขนาด XL

**การใช้งาน:** ใช้งานได้ทั้งการย้ายในแบบทำนั่งและแบบทำนอน เหมาะใช้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อทำกิจวัตรประจำวัน หรือใช้ยกผู้ป่วยขึ้น-ลงรถยนต์

**สำหรับผู้ดูแล :** ใช้ 2 คนยก โดยจับหูของผ้าข้างละมือ แล้วออกแรงยกหรือหามพร้อมกัน

\* ในการกระเถิบตัว โดยใช้ผู้ยก 1 คน จับเฉพาะหูด้านบนของผ้าทั้ง 2 ข้าง ผู้ดูแลสามารถกระเถิบตัวผู้ป่วยได้โดยลำพัง

### ผ้ายกตัวไม่เท็กซ์มี 3 ขนาด

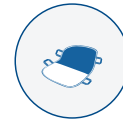

SIZE M

ขนาด 20 x 30 นิ้ว  
สำหรับผู้ที่มีส่วนสูงไม่เกิน 155 ซม.  
รับน้ำหนักได้ 300 กก.  
ใช้โดยคนดูแล 2 คน  
มีหูจับ 4 หู



SIZE L

ขนาด 24 x 35 นิ้ว  
สำหรับผู้ที่มีส่วนสูง 155-180 ซม.  
รับน้ำหนักได้ 300 กก.  
ใช้โดยคนดูแล 2 คน  
มีหูจับ 4 หู



SIZE XL

ขนาด 29 x 52 นิ้ว  
สำหรับผู้ที่นั่งทรงตัวไม่ได้  
หรือไม่สามารถชันคอได้  
รับน้ำหนักได้ 300 กก.  
ใช้โดยคนดูแล 2-3 คน  
มีหูจับ 6 หู

ข้อแนะนำ :

- ควรเลือกขนาดของ “ผ้ายกตัว” ให้เหมาะสมกับน้ำหนักและส่วนสูงของผู้ป่วย
- สามารถสอดแผ่นซึมซับได้ และทำความสะอาดได้ทุกส่วนของผ้า ทั้งการซักมือและซักเครื่อง

## MITEX WATER REPELLANT CARRYING SHEET

### ผ้ายกตัวอบน้ำไม่เท็กซ์

ใช้สำหรับยกตัวผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเพื่อไปอาบน้ำและขับถ่ายโดยผู้ดูแลไม่ต้องอุ้มผู้ป่วยออกจากผ้าอีกครั้ง



สายรัดตัว

ช่องสำหรับ  
การขับถ่าย

- ขนาด 24 x 35 นิ้ว
- รับน้ำหนักได้ 300 กก.
- ใช้โดยคนดูแล 2 คน
- มีหูจับ 4 หู

แผ่นรองรับและหุ้มหัวของผ้ามีความเหนียวแน่น แข็งแรง ทนทาน ผ่านการทดสอบคุณภาพทางวิศวกรรมด้วย Tensile Testing Machine สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 300 กิโลกรัม ผ้ายกตัวอบน้ำผลิตจากวัสดุพิเศษกันน้ำได้ และออกแบบให้มีช่องสำหรับการขับถ่าย

บริษัท ทรัพย์นลิน จำกัด ได้รับสิทธิในการผลิตและจัดจำหน่ายผ้ายกตัวจากมหาวิทยาลัยมหิดลแต่เพียงผู้เดียว

## MITEX SLIDE SHEET

### ผ้ากระเียบตัวไม่เท็กซ์

ผ้ากระเียบตัวมีลักษณะทรงกระบอกผลิตจากไนลอนพิเศษที่มีผิวสัมผัสลื่น ใช้หลักในการเคลื่อนย้ายตัวด้วยวิธีการ “เลื่อนไถล” แทนวิธีการอุ้มหรือยกตัวผู้ป่วยโดยตรง ผู้ดูแลสามารถเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยได้โดยลำพังปราศจากการบอบซ้ำ



- ขนาด 25 x 28 นิ้ว

**การใช้งาน :** ใช้ลากเตียงบนเตียงเพื่อกระเียบตัวหรือเขยื้อนตัวผู้ป่วยในท่านั่ง โดยจับขอบของผ้า แล้วดึงลากพร้อมกันทั้งสองมือ การเสียดสีของวงผ้าช่วยเขยื้อนตัวผู้ป่วยด้วยวิธีการเลื่อนไถล แทนวิธีการอุ้ม/ผลักตัวผู้ป่วยโดยตรง

#### ข้อแนะนำ :

- ผ้ากระเียบตัวไม่เท็กซ์ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เดินไม่ได้แต่นั่งทรงตัวเองได้ ห้ามใช้ผ้ากระเียบตัวในการยกหรือหามเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ใช้ผู้ดูแล 1-2 คน

## MITEX ANTI-BEDSORE GEL CUSHION

### เบาะเจลป้องกันแผลกดทับไม่เท็กซ์

“แผลกดทับ” (Bedsore) เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ที่นอนหรือทำไต่ท่าหนึ่งเป็นเวลานานมักพบบริเวณที่ร่างกายมีการเสียดสีกับความกระด้าง ความร้อน และความอับชื้นการเปลี่ยนอิริยาบถให้ผู้ป่วยสม่ำเสมอร่วมกับการใช้เบาะเจลจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดแผลกดทับได้เพราะเบาะเจลมีความอ่อนนุ่ม ไม่ระคายผิว ให้สัมผัส เย็นสบาย เบาะเจลไม่เท็กซ์สามารถรับแรงกดได้มากถึง 300 กิโลกรัม



- ขนาด 15 x 21 x 0.5 นิ้ว
- น้ำหนักประมาณ 3 กก./ชิ้น
- รับน้ำหนักได้ 300 กิโลกรัม

#### ข้อแนะนำ :

- เบาะเจลป้องกันแผลกดทับมีน้ำหนักประมาณ 3 กก./ชิ้น จึงสามารถนำมาวางต่อกันได้หลายชิ้นโดยไม่เลื่อนไถล
- สำหรับการรองนั่งใช้เบาะเจลจำนวน 1 ชิ้น ส่วนการรองนอนใช้จำนวน 4-6 ชิ้น
- สามารถทำความสะอาดได้ง่ายโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดเช็ดเบาะเจล

## ANTI-BEDSORE PILLOW

### หมอนป้องกันแผลกดทับ รุ่นหนา 6 นิ้ว

หมอนรูปทรงลิ่มใช้หนุนยันร่างกายเพื่อช่วยเปลี่ยนอิริยาบถของผู้ป่วยให้นอนท่าตะแคงเองได้บ้างโดยที่ผู้ดูแลไม่ต้องจับประคองตัวตลอดเวลาหมอนมีช่องระบายอากาศทั้งด้านบนและด้านล่างจึงสามารถช่วยระบายความร้อนความอับชื้นอันเกิดจากการนอนทับในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกันยาวนาน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดแผลกดทับ (Bedsore)

### หมอนป้องกันแผลกดทับ รุ่นบาง 3 นิ้ว

สามารถวางหมอนลงบนวีลแชร์ โดยให้ด้านหนาของหมอนอยู่ตรงกับขอบที่นั่งของวีลแชร์ ส่วนด้านบางอยู่ด้านในให้ผู้ป่วยนั่งทับความสูงของหมอนจะช่วยกันการเลื่อนไถลตัวของผู้ป่วยลงมา

#### ข้อแนะนำ :

- ผู้ดูแลควรพิจารณาใช้หมอนตะแคงกับผู้ป่วยในระยะเวลานาน ๆ เฉพาะช่วยเปลี่ยนอิริยาบถผู้ป่วย และห้ามนำไปใช้ทดแทนหมอนหนุนทั่วไป

○ ช่องระบายอากาศ



- ขนาด 15 x 15 x 6 นิ้ว



- ขนาด 15 x 15 x 3 นิ้ว



\*ภาพจำลองการวางหมอนบนวีลแชร์


## B-L-N PILLOW (BUTTOCKS-LEG-NECK)

### หมอน ก-ข-ค (ก้น-ขา-คอ) • ขนาด 14 x 17 x 4.5 นิ้ว

เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นริดสีดวงหรือมีแผลที่ก้นผู้บาดเจ็บที่เท้าและคนทั่วไปใช้รองนั่งกรณีเป็นริดสีดวง หรือมีแผลที่ก้น ใช้รองหนุนเท้าให้สูงเพื่อลดความเมื่อยล้าหรือมีอาการบาดเจ็บที่เท้า หรือใช้รองหนุนคอเพื่อพักผ่อนอย่างสบาย



ใช้รองนั่ง กรณีเป็นริดสีดวง

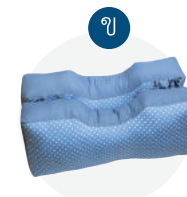

ใช้วางขา เพื่อยกเท้าสูงขึ้น ลดความเมื่อยล้า



ใช้หนุนรองคอ เพื่อพักผ่อนอย่างสบาย



# ALLERGEN-PROOF PRODUCT

## ผลิตภัณฑ์กลุ่มโรคภูมิแพ้

ผ้าคลุมเครื่องนอนกันไรฝุ่น MITEX ถักทอด้วยกรรมวิธีแบบพิเศษโดยใช้เส้นด้ายคุณภาพดี ชนิด “ไมโครไฟเบอร์” ถักทอจนได้ผ้าโครงสร้างแบบทอแน่น (Tightly Woven) ที่มีจำนวนเส้นด้ายรวม  $270 \pm 2$  เส้น/ตารางนิ้ว และมีขนาดของช่องว่างระหว่างเส้นด้ายหรือรูผ้า (Pore Size) โดยเฉลี่ยต่ำกว่า 10 ไมโครเมตร ทำให้สามารถป้องกันการเล็ดลอดของสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่น อาทิ ตัวไรฝุ่น ไข่และมูลของไรฝุ่นได้มากกว่า 99.99%

(ข้อมูลโดย ศูนย์บริการและวิจัยไรฝุ่นศิริราช ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)

นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการเจาะไชเนื้อผ้าของตัวไรฝุ่นได้เป็นอย่างดีแต่ยังคงคุณสมบัติให้อากาศผ่านและถ่ายเทได้ดี พร้อมให้สัมผัสนุ่มสบาย



“จากงานวิจัยที่ได้รับรางวัล  
สู่ผลิตภัณฑ์ผ้ากันไรฝุ่นคุณภาพ”

รองศาสตราจารย์ วรณะ มหาภิตติคุณ  
ผู้เชี่ยวชาญไรฝุ่นและนักวิจัยสร้างสรรค์งานนวัตกรรม

บริษัท ทรัพย์นลิน จำกัด ได้รับสิทธิในการผลิตและจัดจำหน่าย  
ผ้าคลุมเครื่องนอนกันไรฝุ่นจากมหาวิทยาลัยมหิดลแต่เพียงผู้เดียว



### PILLOW COVER

ปกหมอนกันไรฝุ่น

ขนาด : 20x30 นิ้ว



### BODY PILLOW COVER

ปกหมอนบอดี้กันไรฝุ่น

ขนาด : 19x51 นิ้ว



### BOLSTER COVER

ปกหมอนข้างกันไรฝุ่น

ขนาด : 14x42 นิ้ว



### DUVET COVERS

ปกผ้าห่มกันไรฝุ่น

3.5 ฟุต ขนาด : 60x80 นิ้ว

5 ฟุต ขนาด : 70x90 นิ้ว

6 ฟุต ขนาด : 90x100 นิ้ว



### MATTRESS COVERS

ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่น

3.5 ฟุต (Single bed) 42x78x10 นิ้ว

5 ฟุต (Queen-sized bed) 60x78x10 นิ้ว

6 ฟุต (King-sized bed) 72x78x10 นิ้ว



### CUSHION COVERS

ปกหมอนอิงกันไรฝุ่น

ขนาด : 18x18 นิ้ว

ขนาด : 19x19 นิ้ว

ขนาด : 20x20 นิ้ว

ขนาด : 21 x 21 นิ้ว



**MITEX**

Medical Innovative Textile

**[WWW.MITEX.IN.TH](http://WWW.MITEX.IN.TH)**

© copyright by Supnalin Co., Ltd.