


รางวัลที่ P-sync ได้รับ

เหรียญทองจากงานประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สาขาเกษตร จากงาน International Warsaw Invention Show 2014 ณ.ประเทศโปแลนด์

รางวัลชนะเลิศการออกแบบเชิงนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชน ประจำปี 2557

โปรแกรมการเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพื่อกำหนดเวลาผสมเทียม

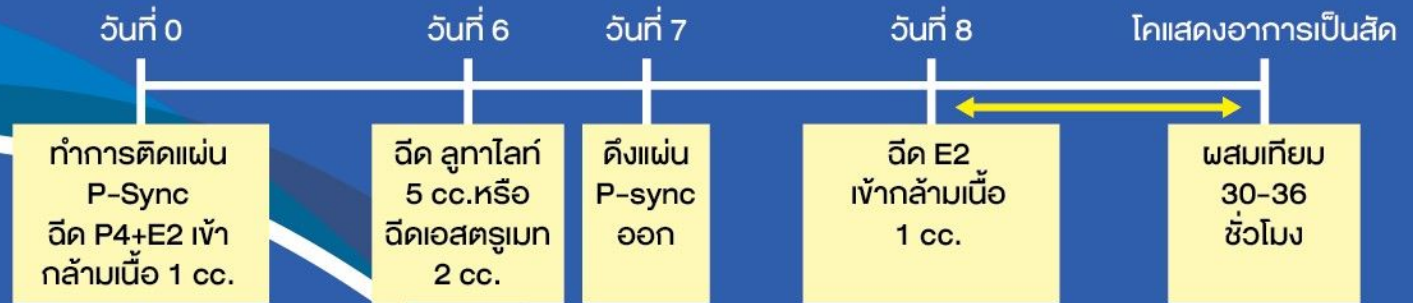

Download : Android ใน Playstore : Psync (โปรแกรมเตือนตั้งเวลาในมือถือ)

การพัน P-sync ตำแหน่งของแผ่นฮอร์โมนควรอยู่ใต้โคนหางเสมอ

คำอธิบายวิธีใช้

1. วันที่ทำวันแรกนับเป็นวันที่ ศูนย์ (พรุ่งนี้นับเป็นวันที่ 1 ในการทำ) ทำความสะอาดบริเวณที่จะติดพลาสติก พันให้จุดฮอร์โมนสำหรับวัวหนึ่งตัวหาง และฉีดสารละลาย P4E2 จำนวน 1 cc. เข้ากล้ามเนื้อ (บริเวณกล้ามเนื้อขาหลังหรือกล้ามเนื้อคอ)
2. วันที่ 6 ฉีด PG (ชื่อทางการค้า Estrumat 2 cc. หรือ Lutalite 5 cc.) เข้ากล้ามเนื้อขาหลัง
3. วันที่ 7 ตัดถอดแผ่น P-sync ออก
4. วันที่ 8 ฉีดสารละลาย E2 1 cc. เข้ากล้ามเนื้อขาหลัง
5. หลังจากฉีด E2 ไปแล้ว 30-36 ชั่วโมงให้ทำการผสมเทียม หรือหากพบอาการสัดให้ผสมหลังจากอาการสัดนิ่งลงแล้ว 8-12 ชั่วโมง.

Step One 01

ทำความสะอาดบริเวณ
หางสัตว์ แล้วเช็ด
ให้แห้ง



Step Two 02

ทำการติด โดยให้
ตำแหน่งของถุงบรรจุ
ฮอร์โมนอยู่ชิด
เส้นเลือดที่โคนหาง



Step Three 03

พันแผ่นเหนี่ยวนำ
รอบโคนหางให้แน่น

